



DIAPHRAGME CAYA


- Naturel
- Sûr
- Sans hormones
- Taille unique

Le diaphragme Caya est vendu exclusivement sur ordonnance en pharmacie. Il doit toujours être utilisé avec un gel contraceptif. Sur la base de remboursement de 3,14 €.

ACL : 3401551699564
Prix conseillé : 33,95 €




NOUVEAU!

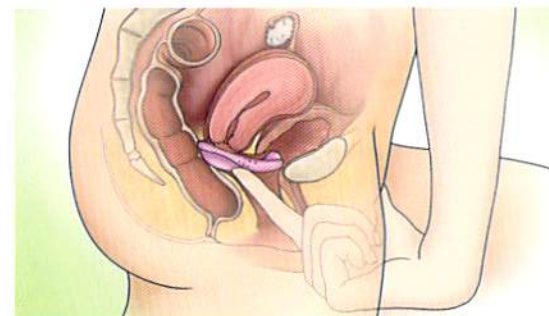

UTILISATION DE CAYA

- Mettre 4 ml de gel contraceptif dans Caya
- Il est plié et poussé (la flèche vers le corps) jusqu'au fond du vagin.
- Il est placé entre la fossette rétro symphysaire et le cul de sac vaginal en recouvrant le col de l'utérus.
- Il peut être placé jusqu'à 2 heures ou juste avant le rapport sexuel.
- Il est recommandé de remettre du gel en cas de rapports consécutifs.
- Le diaphragme doit être gardé au moins 6 heures après le rapport (durée de vie des spermatozoïdes dans le vagin).

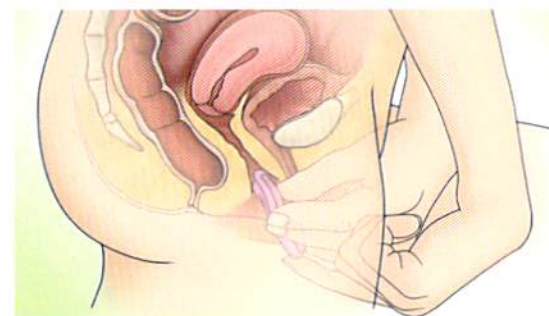

EFFICACITÉ

- Membrane en silicone : barrière mécanique.
- Cellulose dans Cayagel : 2^{ème} barrière mécanique au niveau du col de l'utérus.
- Acide lactique dans Cayagel : immobilisation des spermatozoïdes.



CAYAGEL

Gel contraceptif à base d'acide lactique et de cellulose

ACL : 340151699625
Prix conseillé : 12,95 €


NOUVEAU!




CONTRE-INDICATIONS

- Pendant les 6 semaines post-partum.
- Femme utilisant un diaphragme de taille 60 ou supérieure à 80mm (2,7% des femmes).
- Prolapsus très important.
- Fossette rétro symphysaire trop peu prononcée ou inexistante.
- Infections urinaires fréquentes.

Caya diaphragme le bon positionnement

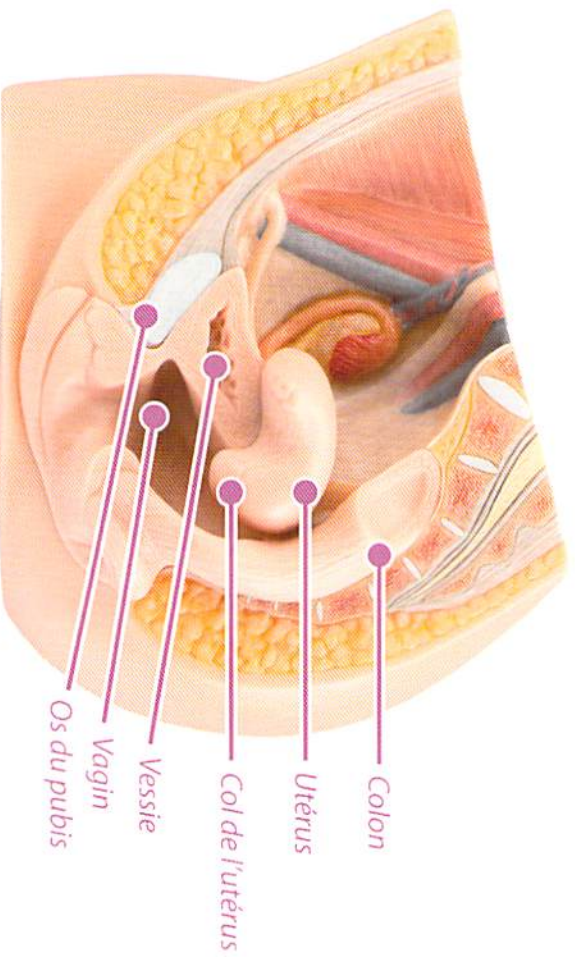

CAYA MODÈLE PELVIEN

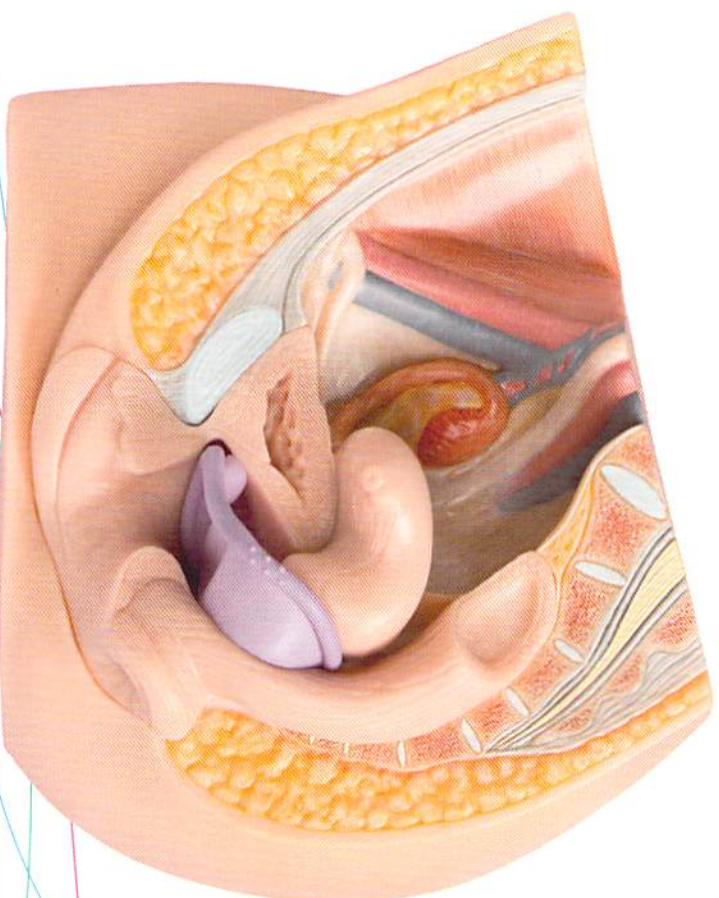

CAYA MODÈLE PELVIEN AVEC DIAPHRAGME CAYA

